



THD N-ANO



Utilizzo

L'anoscopio THD N-ano è un dispositivo medico MONOUSO indicato per l'analisi del canale anorettale.

Descrizione Generale

L'anoscopio THD N-ano combina in un unico dispositivo monouso un pratico e leggero anoscopio ed una potente fonte luminosa integrata a LED, per avere una visione chiara e dettagliata della zona di ispezione.

L'anoscopio THD N-ano è pronto all'uso e non necessita di altre attrezzature per l'utilizzo.

La fonte luminosa si attiva con la semplice estrazione di una linguetta.

Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Autoilluminante con luce integrata nel dispositivo
- Profilo inserimento atraumatico
- Estremamente compatto
- Pronto all'uso
- Leggero (40 g)
- Dispositivo CE di Classe I
- Confezionato singolarmente
- Latex Free

Vantaggi:

- non richiede una fonte luminosa aggiuntiva
- non richiede una preparazione prima dell'uso
- elimina il rischio di contaminazione incrociata
- ingombro ridotto, facilità di manovra
- mini-invasivo, atraumatico





Scheda Tecnica


REF. 800040

REF. 800134

REF. 800165

REF. 800166

IT

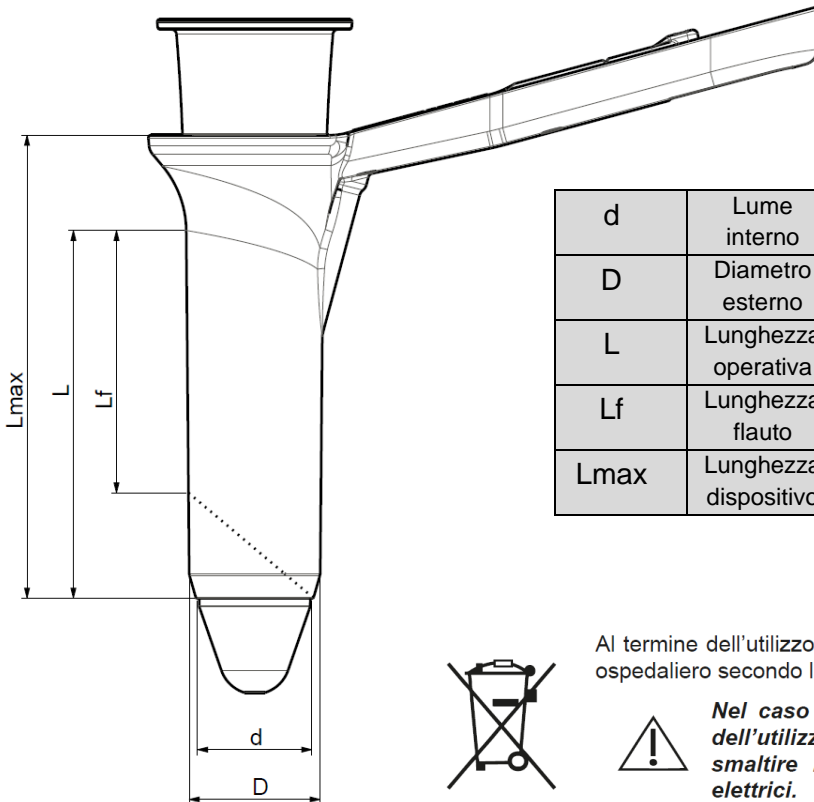

		N-ano	N-ano MAXI
d	Lume interno	18.5 mm	22.5 mm
D	Diametro esterno	21.7 mm	25.8 mm
L	Lunghezza operativa	65 mm	72 mm
Lf	Lunghezza flauto	52 mm	47 mm
Lmax	Lunghezza dispositivo	91 mm	91 mm



Al termine dell'utilizzo smaltire gli anoscopi THD N-ano come rifiuti ospedaliero secondo le leggi vigenti.



Nel caso l'anoscopio debba essere smaltito prima dell'utilizzo (ad esempio perché danneggiato) non smaltire nei rifiuti generici. Contiene componenti elettrici.

THD N-ano				
TRONCO		FLAUTO		
Cod.	Q.tà	Denominazione	N° RDM	CND
800040 - 50	50	Anoscopio N-Ano Tronco	734030	G02060301
800134 - 25	25	Anoscopio N-Ano Flauto	1160385	G02060301
800134 - 50	50	Anoscopio N-Ano Flauto	1160385	G02060301
800165 - 50	50	Anoscopio N-Ano MAXI Tronco	1364283	G02060301
800166 - 25	25	Anoscopio N-Ano MAXI Flauto	1364284	G02060301
800166 - 50	50	Anoscopio N-Ano MAXI Flauto	1364284	G02060301