



THD FACE MASK

THD F3 bluebarrier



Made in Italy



NOTA: Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto; si rimanda alla tabella dei codici prodotto per varianti disponibili.

CLASSIFICAZIONE:

Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745

TIPO

Maschera facciale ad uso medico di **tipo II**, monouso, non sterile, latex free.

DESTINAZIONE D'USO

THD Face Mask – THD F3 bluebarrier è un dispositivo medico monouso non sterile destinato a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.

DESCRIZIONE

THD F3 bluebarrier è classificata come mascherina chirurgica di tipo II secondo standard EN 14683, idonea a coprire bocca, naso e mento di chi la indossa e assicurando una stretta adesione ai lati.

THD F3 bluebarrier è specificatamente progettata **per limitare la trasmissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici** con un'Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE) superiore al 99%, grazie ad un multistrato di TNT in polipropilene e poliestere con strato filtrante interno.

Le efficienti proprietà di filtraggio e la buona vestibilità della mascherina chirurgica **THD F3 bluebarrier** forniscono una valida soluzione in termini di:

- **Comfort:** Lo strato a contatto con la pelle è morbido e non abrasivo. I morbidi elastici assicurano che la maschera aderisca strettamente ai lati del viso di chi la indossa con il massimo confort.
- **Protezione:** lo strato interno garantisce le proprietà filtranti bloccando più del 99% della penetrazione degli agenti infettivi.
- **Alta respirabilità:** il materiale consente un'agevole flusso d'aria in entrambe le direzioni.

CARATTERISTICHE:


- Ottima resistenza alla penetrazione batterica con **potere filtrante BFE > 99%**
- Buona permeabilità all'aria che garantisce un'**alta respirabilità**
- Ottima vestibilità ed elastici confortevoli
- Composta da tre strati di TNT
- Adattatore nasale conformabile, utile per ridurre l'appannamento degli occhiali
- Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale
- Ultraleggera
- Ipoallergenica
- Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 30 UFC/g

MATERIALI: Tessuto Non Tessuto (TNT) – Spunbond/Meltblown

COMPOSIZIONE CHIMICA: polipropilene, poliestere



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO:

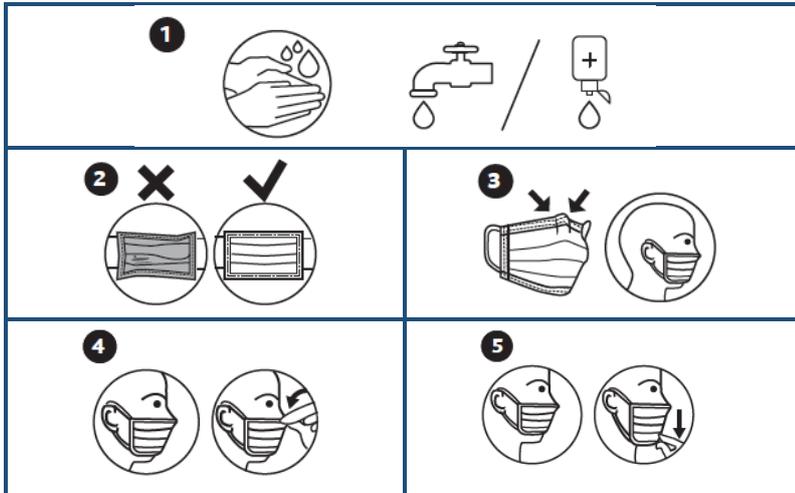

MANUTENZIONE: Non necessaria, dispositivo monouso.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO: Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

PRECAUZIONE DI UTILIZZO: Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

CONTROINDICAZIONI: Non ci sono particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO: Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto. Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta utilizzata. In caso di utilizzo, la mascherina dovrà essere smaltita:

- In ambito domestico, nella raccolta indifferenziata
- In ambito ospedaliero/professionale, negli appositi contenitori dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo

Caratteristiche THD Face Mask – THD F3 bluebarrier			
Taglie	Regular Fit	Small Fit	Junior
Dimensioni – Larghezza	17,5 cm	14,5 cm	14,5 cm
Dimensioni – Altezza (mascherina plissettata)	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
Elastici - Lunghezza	Standard	Standard	Junior
Materiale	3 strati di TNT Polipropilene/Poliestere: - strato esterno e strato a contatto pelle in TNT Spunbond - strato intermedio con proprietà filtranti in TNT Meltblown		
Colore	Azzurro lato esterno – bianco lato interno		
Sterilizzazione	Non Sterile		
Standard Applicati	EN14683 / ISO10993-1		
Classificazione prodotto	Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745		
Classificazione EN14683	Maschera facciale ad uso medico di Tipo II		
Efficienza di filtrazione batterica (BFE)	> 99%		
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	< 40		
Pulizia microbica	≤ 30 UFC/g		

REF	Denominazione	Descrizione	Taglia	Q.tà	RDM	CND
800256	THD FACE MASK F3 50 A M R	THD F3 bluebarrier - 50 pz - Regular	Regular Fit	50 pz	2032909	T020601
800257	THD FACE MASK F3 20 A M R	THD F3 bluebarrier - 20 pz - Regular	Regular Fit	20 pz	2032911	T020601
800261	THD FACE MASK F3 20 A M S	THD F3 bluebarrier - 20 pz - Small	Small Fit	20 pz	2032913	T020601
800260	THD FACE MASK F3 20 A M J	THD F3 bluebarrier - 20 pz - Junior	Junior	20 pz	2032920	T020601